



Ce mode d'emploi simplifié ne vous est communiqué qu'à titre indicatif et ne remplace en aucun cas le mode d'emploi de l'appareil, des manchettes et de l'attelle.

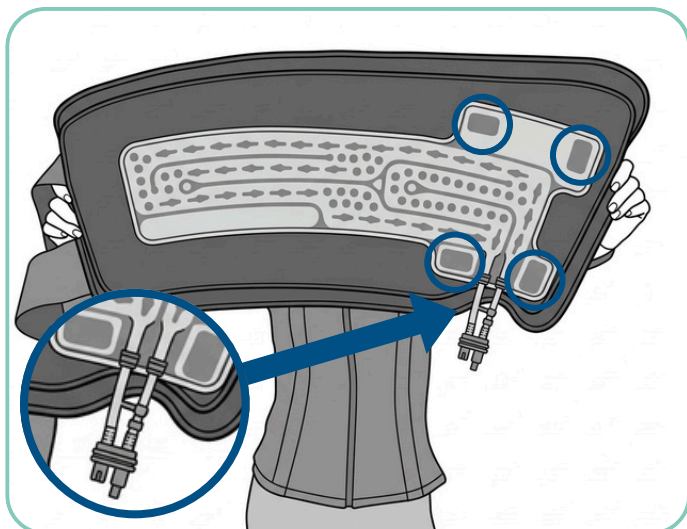


1. **Disposer** le tube de la manchette à eau dans l'encoche de l'attelle, puis **associer** l'attelle VARIO PRO à sa manchette grâce au Velcro.

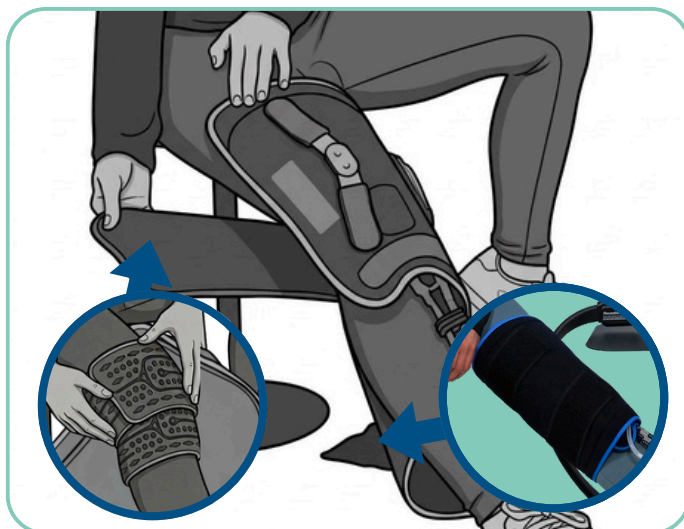


2. **Enroulez** d'abord la manchette à eau associée à l'attelle VARIO PRO, puis **fermez** l'attelle à l'aide des sangles élastiques en faisant un tour complet de l'articulation, sans trop serrer.

Placer la manchette et/ou l'attelle sur la zone à traiter. (si nécessaire se référer au mode d'emploi)

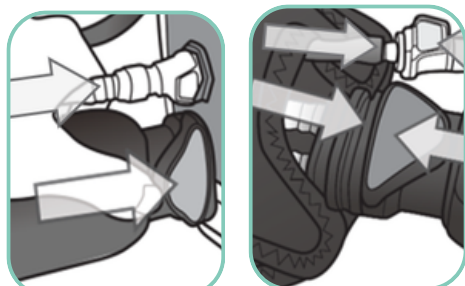

3. **Brancher** le tube de raccordement à l'appareil.

4. **Brancher** le tube de raccordement à la manchette.

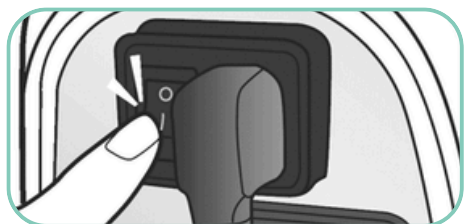

5. **Brancher** le câble d'alimentation à l'appareil et **Allumer**.



7. **Démarrer** le programme en appuyant sur le bouton tactile en haut à droite de la molette.



Les boutons tactiles réagissent généralement mieux lorsque la pression est effectuée avec le doigt à plat.


Pour plus d'informations sur l'installation de l'attelle VARIO PRO ou le démarrage d'une séance de cryothérapie en vidéo :

YouTube : Saneva Officiel



Si, le message «Veuillez procéder au nettoyage du réservoir» apparaît, **appuyer une fois sur la molette** puis utiliser l'appareil normalement.

Erreur 31 ou Erreur 32 «Possible fuite»

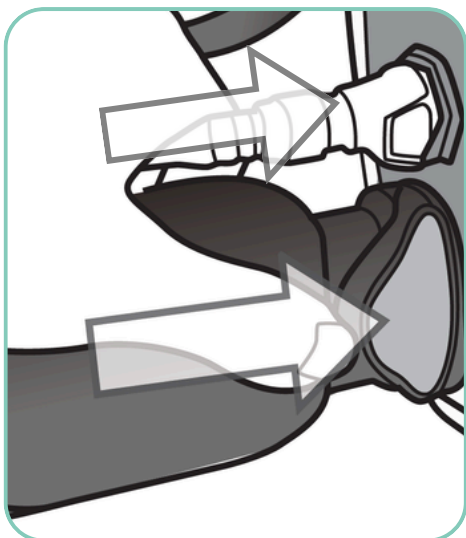


- 1. S'assurer que le tube de raccordement** soit correctement branché à l'appareil, à la manchette à eau et à l'attelle.
- 2. (Uniquement pour l'attelle de genou)** S'assurer que l'attelle soit suffisamment serrée. Les sangles doivent faire au moins un tour complet de la jambe.
- 3. Patienter 60 secondes** et s'assurer que le message d'erreur disparaisse.

Absence de compression dynamique



S'assurer que la valve ON-OFF de l'attelle de genou **soit en position ON.**

Erreur 11 ou Erreur 12 «Ajouter de l'eau» apparaît :

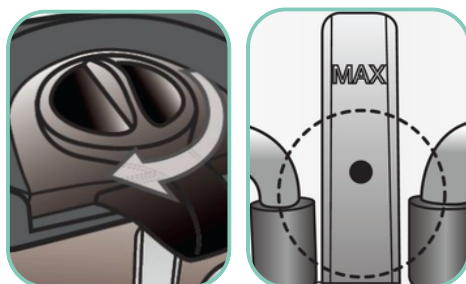

- 1. Eteindre l'appareil**, dévisser le bouchon sur le dessus de l'appareil.
- 2. Ajouter de l'eau déminéralisée** jusqu'au maximum en vérifiant l'indicateur rouge au dos de l'appareil.

SI UNE ERREUR AUTRE QUE CELLES CITÉES PRÉCÉDEMMENT APPARAÎT, ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET **CONTACTEZ VOTRE PRESTATAIRE LOCAL : 06 60 04 13 95**