

CE


MANCHETTE EPAULE REUTILISABLE

CTC Wrap

CTCSF00

MANUEL D'UTILISATION

Ce manuel d'utilisation est destiné à assurer la sécurité de l'utilisateur et à prévenir les dommages matériels. Veuillez à conserver ce manuel dans un endroit où l'utilisateur pourra le trouver chaque fois qu'il en aura besoin.

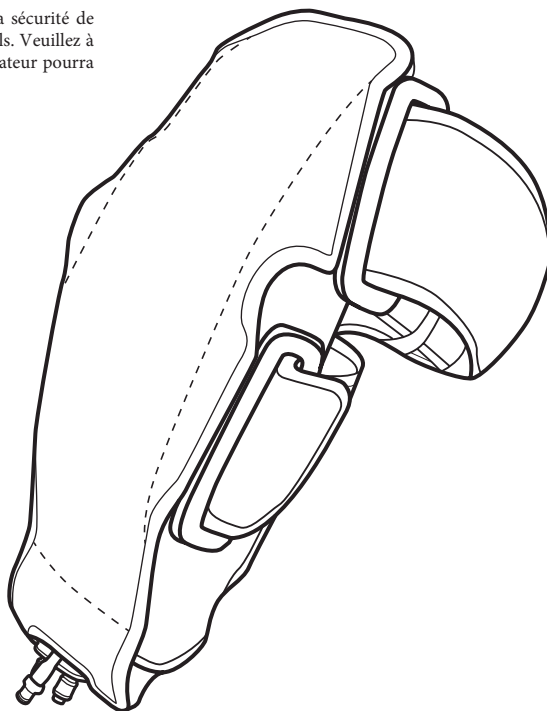

DS MAREF
DAESUNG MAREF CO.,LTD.


Merci d'avoir acheté la manchette CTC.

Veillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour une utilisation sûre et correcte.


| Précaution & Avertissement

- Avant de l'utiliser, vérifiez l'état de la manchette.
- Avant de porter la manchette, retirez tous les accessoires de la partie de votre corps où elle sera portée.
- Utilisez la manchette en portant des vêtements fins afin qu'elle ne touche pas directement votre peau.
- Gardez la zone de traitement sèche et vérifiez-la fréquemment.
- Si l'utilisateur a une peau sensible aux températures élevées ou basses, consultez votre médecin avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas cette manchette à d'autres fins que celles prévues.
- Lorsqu'il s'agit de déterminer comment régler la température, le mode et le temps de ce produit, suivez les instructions données par votre médecin.
- En cas de douleur, d'état anormal ou d'œdème pendant l'utilisation de l'appareil, cessez de l'utiliser et faites constater le symptôme par un médecin.
- En cas d'utilisation d'accessoires et de pièces non approuvés par DAESUNG MAREF, il existe un risque de dysfonctionnement.

| Noms des parties

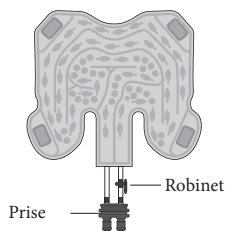

Manchette à eau

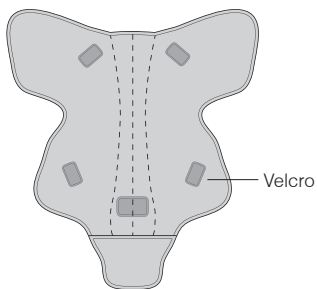


Manchette à air

| Comment porter la manchette


※ Portez la manchette de manière à ce que le coussinet adhère uniformément et assurez-vous qu'il n'y a pas de plis au milieu. Utilisez la manchette en portant des linges fins.

1.

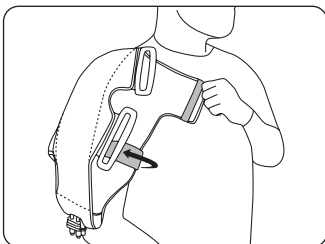


Avant de porter la manchette, insérez la bande dans l'anneau à l'arrière de la manchette et fixez-la. Placez la manchette orientée vers le bas sur l'épaule à porter comme indiqué sur la figure, puis tirez sur la bande pour la fixer en premier.

2.

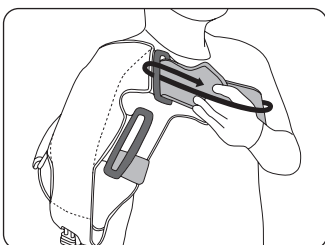

Comme indiqué sur la figure, retirez la bande qui a été disposée à l'intérieur du bracelet et tirez le plus loin possible pour la fixer d'abord.

3.

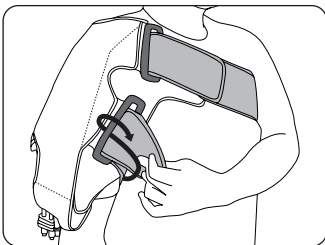


Insérez la sangle dans l'anneau inférieur comme indiqué sur la figure, puis tirez aussi loin que possible pour la fixer. (Lors du port, ne tirez pas trop fort sur la sangle pour éviter que la manchette ne se torde sur l'épaule).

| Drainage

※ Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du CTC-7 7-2.


1.

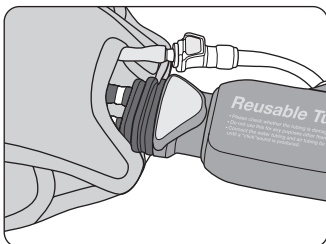

Vérifiez si le bouchon du réservoir d'eau situé à l'arrière de l'appareil CTC-7 est complètement fermé.

Vérifiez si les tubes et les manchettes sont connectés à CTC-7.

2.

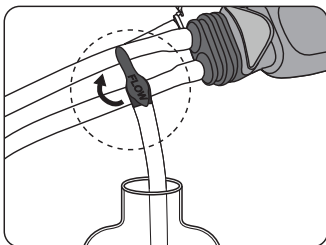

- Connectez le tuyau de raccordement fourni avec la vanne de vidange de la manchette. Lors de la vidange, préparer un récipient d'eau pour recevoir l'eau vidangée. Placer le tuyau attaché à la manchette de manière à ce qu'il soit face au récipient d'eau préparé, et ouvrir le tuyau en le faisant pivoter de 90 degrés.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la molette de l'écran d'attente de vidange pour commencer la vidange.


- Lorsque la manchette doit être stockée pendant une longue période, assurez-vous de retirer complètement l'eau distillée à l'intérieur de ce système.



Si l'eau distillée à l'intérieur de cette manchette n'est pas complètement vidée, il existe un risque de contamination qui peut provoquer une panne

| Comment nettoyer & assembler

1.

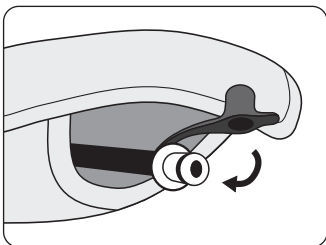


Après avoir utilisé la manchette, fermez le trou de la tubulure au fond avec le bouchon en caoutchouc et retirez complètement l'eau environnante.




Si vous ne fermez pas le trou du tuyau à l'aide du bouchon en caoutchouc, il y a un risque de contamination qui peut entraîner une panne.

2.

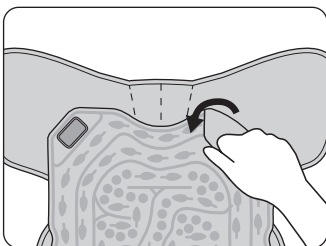

Séparer la manchette à et la manchette à eau en retirant le velcro attaché comme indiqué sur la figure.

3.

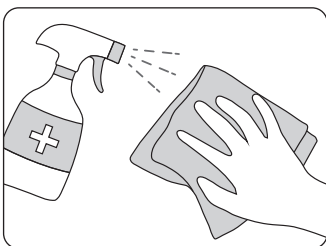


- Essuyez la manchette séparé avec de l'éthanol de qualité médicale à 70-80% ou de l'alcool isopropylique et séchez-la complètement.
- Lorsqu'une substance étrangère est attachée à la manchette, appliquez un peu d'eau ou de détergent neutre sur un chiffon, et utilisez le chiffon pour retirer délicatement la substance étrangère.



N'utilisez pas de sèche-linge ou de chaleur pour sécher la manchette

4.

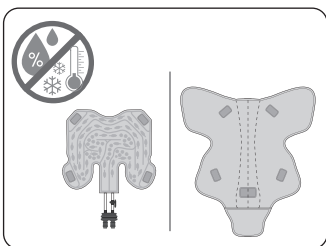

Lors du rangement, stockez la manchette à air et la manchette à eau séparément dans un endroit propre, sec et sans humidité.



Lorsque la manchette à eau atteint une température inférieure à la température ambiante durant une moyenne-longue durée, cette dernière peut produire de la condensation naturelle. Il est donc recommandé de stocker la manchette à eau et la manchette à air séparément.



Ne pas stocker la manchette dans un endroit sale et à basse température. Si la manchette est stockée en dessous de 0°C, l'eau à l'intérieur peut geler, et l'endommager