

CE


MANCHETTE CHEVILLE REUTILISABLE

CTC Wrap

CTCAF00

MANUEL D'UTILISATION

Ce manuel d'utilisation est destiné à assurer la sécurité de l'utilisateur et à prévenir les dommages matériels. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit où l'utilisateur pourra le trouver chaque fois qu'il en aura besoin.

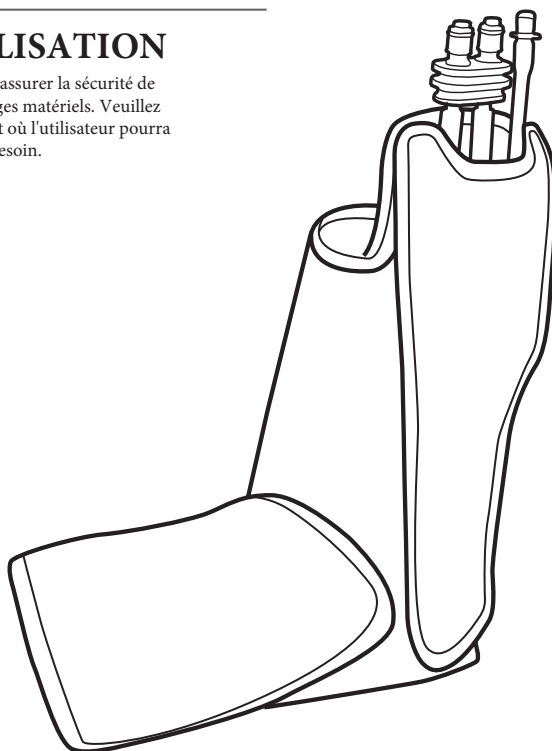

DS MAREF
DAESUNG MAREF CO.,LTD.


Merci d'avoir acheté la manchette CTC.

Veillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour une utilisation sûre et correcte.


| Précaution & Avertissement

- Avant utilisation, vérifier l'état de la manchette
- Avant de porter la manchette, retirez tous les accessoires de la partie du corps où la manchette sera portée.
- Utilisez la manchette en portant des vêtements fins afin qu'elle ne touche pas directement votre peau.
- Gardez la zone de traitement sèche et vérifiez-la fréquemment.
- Lorsque l'utilisateur prévu porte un système de maintien des fonctions vitales, s'assurer qu'il consulte son médecin. (ex : dispositif d'assistance cardiaque)
- Lorsque l'utilisateur a une peau sensible aux températures élevées/basses, consultez votre médecin avant l'utilisation.
- N'utilisez pas cette manchette à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Lorsqu'il s'agit de déterminer comment la température, le mode et temps d'utilisation de ce produit doivent être réglés, suivez les instructions données par votre médecin.
- En cas de douleur, d'état anormal ou d'œdème pendant l'utilisation de l'appareil, cessez de l'utiliser et laissez un médecin constater le symptôme.
- N'utilisez pas la manchette sous la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température est élevée.
- L'utilisation d'accessoires et de pièces non approuvés par DAESUNG MAREF présente un risque de dysfonctionnement.

| Noms des parties

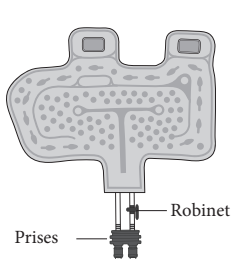

Manchette à eau


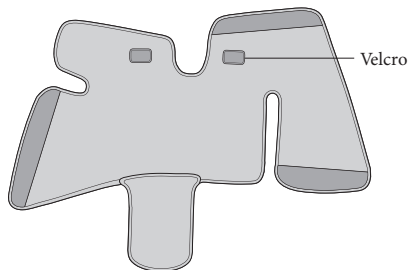


Manchette à Air

| Comment porter la manchette


※ Portez la manchette de manière à ce que le coussinet adhère uniformément et assurez-vous qu'il n'y a pas de plis au milieu. Utilisez la en portant des linges fins.

1.

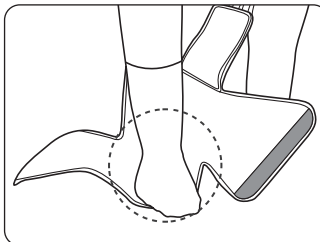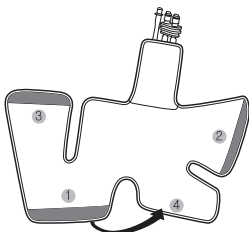

Avant de porter la manchette, attachez le Velcro aux points A et B comme indiqué sur la figure et placez votre talon le long du trou de l'attelle.
(Lors du port, veillez à ce que le bouton soit orienté vers le haut).


2.

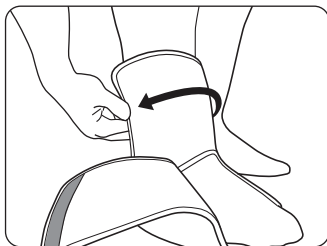

Vérifiez la figure ci-dessus pour que manchette et la cheville soient en contact à la fois avec votre cheville et l'attelle et fixez-le tout au Velcro C.

(Avant de fixer le Velcro, insérez la manchette à l'intérieur de l'attelle).

3.

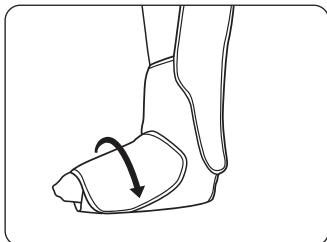


Vérifiez la figure et utilisez le Velcro D pour que la manchette votre pied soient en contact étroit l'un avec l'autre.

| Drainage


※ Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du CTC-7 7-2

1.

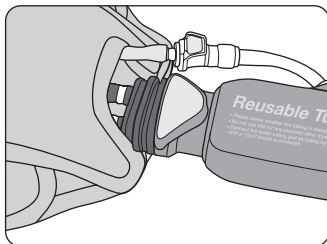

Vérifiez si le bouchon du réservoir d'eau situé à l'arrière du CTC-7 est complètement fermé puis vérifiez si les tuyaux et les enveloppes sont connectés au CTC-7.


2.

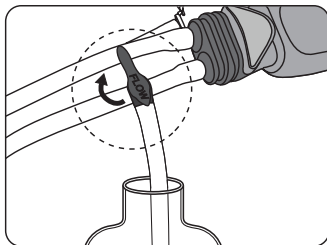

Connectez le tuyau de raccordement fourni avec le robinet. Lors de la vidange, préparer un récipient d'eau pour recueillir l'eau vidangée. Placer le tuyau de manière à ce qu'il soit face au récipient d'eau préparé, et ouvrez le robinet en le faisant pivoter de 90 degrés. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la molette de l'écran d'attente de la vidange pour commencer la vidange.

| Comment nettoyer et ranger

1.

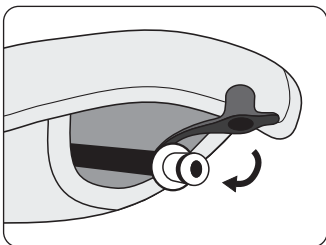


Après avoir utilisé

After using the wrap, close the tubing hole at the bottom with a rubber stopper and completely remove the surrounding water if you do not close the hose hole with a rubber stopper




Si vous ne fermez pas le trou du tuyau à l'aide du bouchon en caoutchouc, il y a un risque de contamination qui peut entraîner une panne.

2.

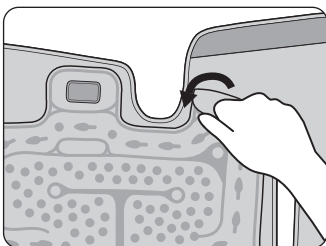

Séparer la manchette à et la manchette à eau en retirant le velcro attaché comme indiqué sur la figure

3.

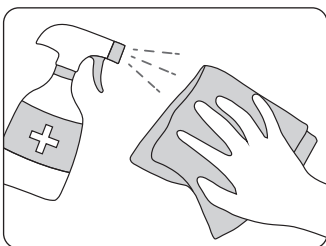


- Essuyez la manchette séparé avec de l'éthanol de qualité médicale à 70-80% ou de l'alcool isopropylique et séchez-la complètement.
- Lorsqu'une substance étrangère est attachée à la manchette, appliquez un peu d'eau ou de détergent neutre sur un chiffon, et utilisez le chiffon pour retirer délicatement la substance étrangère.



N'utilisez pas de sèche-linge ou de chaleur pour sécher la manchette

4.

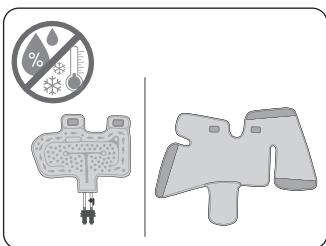

Lors du rangement, stockez la manchette à air et la manchette à eau séparément dans un endroit propre, sec et sans humidité.



Lorsque la manchette à eau atteint une température inférieure à la température ambiante durant une moyenne-longue durée, cette dernière peut produire de la condensation naturelle. Il est donc recommandé de stocker la manchette à eau et la manchette à air séparément.



Ne pas stocker la manchette dans un endroit sale et à basse température. Si la manchette est stockée en dessous de 0° C, l'eau à l'intérieur peut geler, et l'endommager